


Istruzioni per l'uso di Enerzair Breezhaler

Prima di utilizzare l'inalatore Enerzair Breezhaler legga completamente le istruzioni per l'uso.

Queste istruzioni sono disponibili anche scansionando il codice QR o visitando il sito:


www.breezhaler-asthma.eu/enerzair

“QR code da includere”

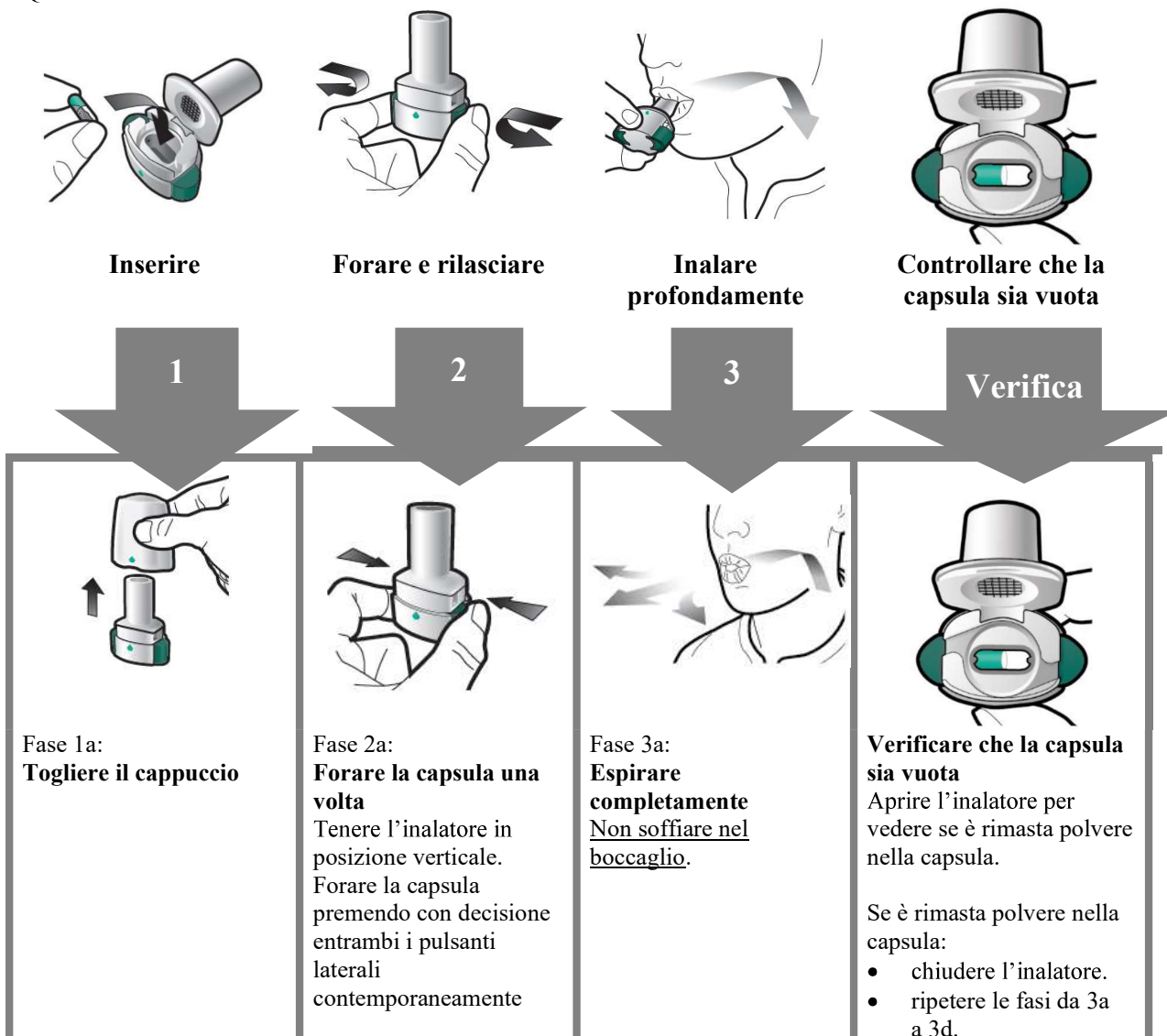



Fase 1b:
Aprire l'inalatore

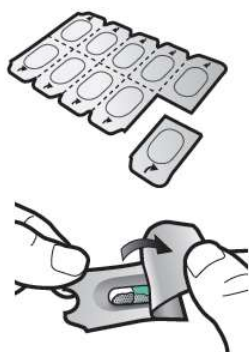

Fase 1c:
Estrarre la capsula
Separare uno degli alveoli dal resto del blister.
Togliere la pellicola protettiva dall'alveolo ed estrarre la capsula.
Non spingere la capsula attraverso la pellicola.
Non ingerire la capsula.


Quando la capsula viene forata, si deve sentire un rumore.
Forare la capsula una sola volta.



Fase 2b:
Rilasciare i pulsanti laterali



Fase 3b:
Inalare profondamente il medicinale
Tenere l'inalatore come mostrato nella figura.
Portare il boccalio alla bocca e chiudere fermamente le labbra attorno al boccalio.
Non premere i pulsanti laterali.
Inspirare il più rapidamente e profondamente possibile.
Durante l'inalazione si sentirà un ronzio.
Quando si inala si può percepire il sapore del medicinale.

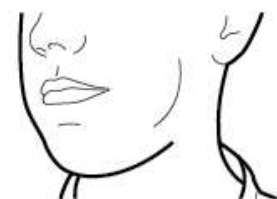

Fase 3c:
Trattenere il respiro
Trattenere il respiro fino a 5 secondi.

Fase 3d:
Sciacquare la bocca
Dopo ogni dose, sciacquare la bocca con acqua e sputare.



Con polvere



Vuota



Estrarre la capsula vuota
Gettare la capsula vuota nei rifiuti domestici.
Chiudere l'inalatore e rimettere il cappuccio.