
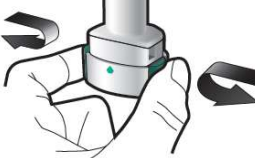









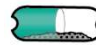



Navodila za uporabo zdravila Enerzair Breezhaler

Pred uporabo inhalatorja Enerzair Breezhaler preberite navodila za uporabo v celoti. Navodila si lahko ogledate tudi tako, da odčitate QR kodo oziroma obiščite spletno stran www.breezhaler-asthma.eu/enerzair.

‘Vstaviti QR kodo’

 <p>Vstavite</p>	 <p>Predrite in izpusite</p>	 <p>Globoko vdihnite</p>	 <p>Preverite, da je kapsula prazna</p>
1	2	3	preverite
 <p>Korak 1a: Snemite pokrovček.</p>  <p>Korak 1b: Odprite inhalator.</p>	 <p>Korak 2a: Enkrat predrite kapsulo. Inhalator držite pokonci. Kapsulo predrete tako, da oba stranska gumba istočasno močno stisnete.</p>  <p>Korak 2b: Izpustite stranska gumba.</p>	 <p>Korak 3a: Izdihnite kolikor morete. <u>Ne pijajte v inhalator.</u></p>  <p>Korak 3b: Zdravilo globoko vdihnite. Držite inhalator, kot kaže slika. Ustnik namestite v usta in ga čvrsto objemite z ustnicami. <u>Pri tem ne pritiskajte stranskih gumbov.</u></p>	 <p>Preverite, da je kapsula prazna. Odprite inhalator in pogledajte, ali je v kapsuli ostalo še kaj praška.</p> <p>Če je v kapsuli še prašek:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zaprite inhalator. • Ponovite korake 3a do 3d. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>ostanki praška.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>prazno</p> </div> </div>



Korak 1c:

Vzemite kapsulo.

Po perforaciji odtrgajte eno enoto s pretisnega omota.

Odlepите zaščitno plast in vzamite kapsulo.

Kapsule ne potiskajte skozi folijo.

Kapsule ne smete pogoltniti.

Vdihnite hitro in globoko kolikor morete.
Med vdihovanjem boste slišali brneč zvok.
Med vdihom lahko začutite okus zdravila.



Korak 3c:

Zadržite dih.

Zadržite dih do 5 sekund.

Korak 3d:

Sperite usta.

Po vsakem odmerku sperite usta z vodo in jo nato izpljunite.

Odstranite prazno kapsulo.

Prazno kapsulo odvrzite med gospodinjske odpadke.

Zaprite inhalator in ga pokrijte s pokrovčkom.