
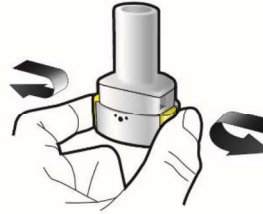
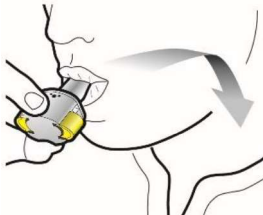

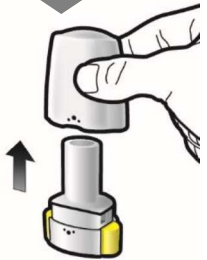

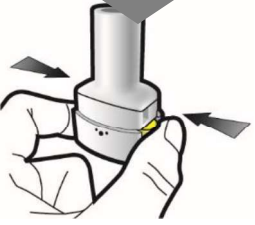


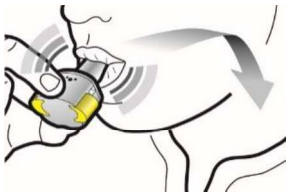

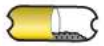



Prosimo, da pred uporabo zdravila Ultibro Breezhaler v celoti preberete spodnja **navodila za uporabo**.

			
<p>vstavite</p>	<p>predrite in izpustite</p>	<p>globoko vdihnite</p>	<p>preverite, da je kapsula prazna</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	<p>preverite</p>
 <p>Korak 1a: <b>Snemite pokrovček.</b></p>  <p>Korak 1b: <b>Odprite inhalator.</b></p>	 <p>Korak 2a: <b>Enkrat predrite kapsulo.</b> Inhalator držite pokonci. Kapsulo predrete tako, da oba stranska gumba istočasno močno stisnete. Ko se kapsula predre, morate slišati zvok. <u>Kapsulo predrite samo enkrat.</u></p>  <p>Korak 2b: <b>Stranska gumba izpustite.</b></p>	 <p>Korak 3a: <b>Izdihnite kolikor morete. Ne pijajte v inhalator.</b></p>  <p>Korak 3b: <b>Zdravilo globoko vdihnite.</b> Držite inhalator kot kaže slika. Ustnik namestite v usta in ga čvrsto objemite z ustnicami. <u>Pri tem ne pritiskajte stranskih gumbov.</u></p>	 <p><b>Preverite, da je kapsula prazna.</b> Odprite inhalator in pogledajte, ali je v kapsuli ostalo še kaj praška.</p> <p>Če je v kapsuli še prašek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zaprite inhalator.</li> <li>• ponovite korake 3a do 3c.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="1141 1422 1244 1534">  <p>ostanki praška</p> </div> <div data-bbox="1316 1422 1420 1534">  <p>prazno</p> </div> </div>



Korak 1c:

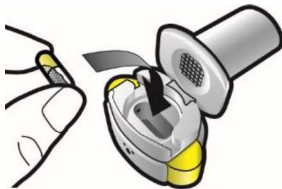
**Vzemite kapsulo.**

Po perforaciji odtrgajte eno enoto s pretisnega omota.

Odlepите zaščitno plast in vzamite kapsulo.

Kapsule ne potiskajte skozi folijo.

Kapsule ne smete pogoltniti.



Korak 1d:

**Vstavite kapsulo.**

Kapsule nikoli ne nameščajte neposredno v ustnik.



Korak 1e:

**Zaprte inhalator.**

Vdihnite hitro in globoko kolikor morete.  
Med vdihovanjem boste slišali brneč zvok.  
Med vdihom lahko začutite okus zdravila.



Korak 3c:

**Zadržite dih.**

Zadržite dih do 5 sekund.



**Odstranite prazno kapsulo.**

Prazno kapsulo odvrzite med gospodinjske odpadke.

Zaprte inhalator in ga pokrijte s pokrovčkom.

**Pomembne informacije**

- Ultibro Breezhaler kapsule vedno shranjujte v pretisnem omotu in jih vzemite iz njega šele tik pred uporabo.
- Pri jemanju kapsule iz pretisnega omota je ne potiskajte skozi folijo.
- Kapsule ne smete pogoltniti.
- Kapsul Ultibro Breezhaler ne uporabljajte z nobenim drugim inhalatorjem.
- Inhalatorja Ultibro Breezhaler ne uporabljajte za inhaliranje drugih zdravil iz kapsul.
- Kapsule nikoli ne dajajte v usta oziroma je ne nameščajte v ustnik inhalatorja.
- Stranska gumba pritisnite samo enkrat.
- Ne pihajte v ustnik.
- Ko vdihujete skozi ustnik, ne pritiskajte stranskih gumbov.
- Kapsule ne prijemajte z mokrimi rokami.
- Inhalatorja nikoli ne umivajte z vodo.