



Leggere completamente le **istruzioni per l'uso** prima di utilizzare Ultibro Breezhaler.

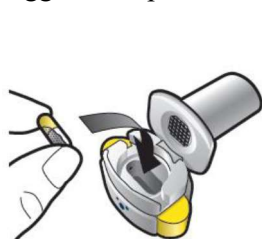


Inserire

1

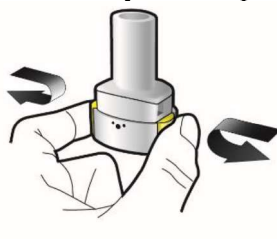


Forare e rilasciare

2

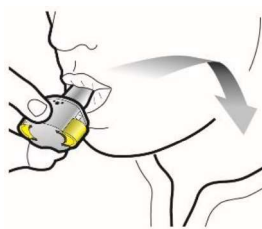


**Inalare
profondamente**

3

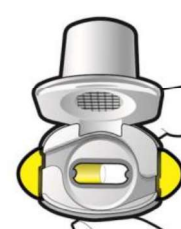

**Controllare che la
capsula sia vuota**


**Verifi
ca**

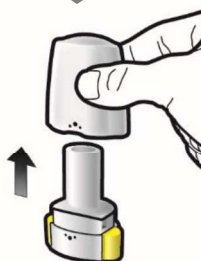

Fase 1a:
Togliere il cappuccio



Fase 1b:
Aprire l'inalatore

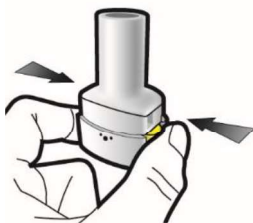


Fase 2a:
**Forare la capsula una
sola volta**
Tenere l'inalatore in
posizione verticale.
Forare la capsula
premendo con decisione
entrambi i pulsanti
laterali
contemporaneamente.
Quando la capsula viene
forata, si deve sentire un
rumore.
Forare la capsula una
sola volta.



Fase 2b:
**Rilasciare i pulsanti
laterali**



Fase 3a:
**Espirare
completamente**
Non soffiare nel
boccaglio.

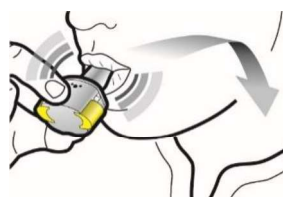

Fase 3b:
**Inalare profondamente
il medicinale**
Tenere l'inalatore come
mostrato nella figura.
Portare il boccaglio alla
bocca e chiudere
fermamente le labbra
attorno al boccaglio.
Non premere i pulsanti
laterali.



**Verificare che la capsula
sia vuota**
Aprire l'inalatore per
vedere se è rimasta polvere
nella capsula.

Se è rimasta polvere nella
capsula:

- chiudere l'inalatore;
- ripetere le fasi da 3a a 3c.



Con polvere



Vuota



Fase 1c:


Estrarre la capsula

Separare uno degli alveoli dal resto del blister.

Togliere la pellicola protettiva dall'alveolo ed estrarre la capsula.

Non spingere la capsula attraverso la pellicola.

Non ingerire la capsula.

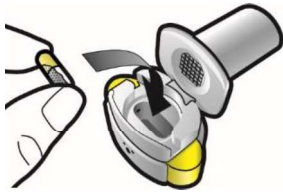

Fase 1d:

Inserire la capsula

Non inserire mai la capsula direttamente nel boccaglio.



Fase 1e:

Chiudere l'inalatore

Inspirare il più rapidamente e profondamente possibile. Durante l'inalazione si sentirà un ronzio. Quando si inala si può percepire il sapore del medicinale.



Fase 3c:

Trattenere il respiro

Trattenere il respiro fino a 5 secondi.



Estrarre la capsula vuota

Gettare la capsula vuota nei rifiuti domestici.

Chiudere l'inalatore e rimettere il cappuccio.

Informazioni importanti

- Le capsule di Ultibro Breezhaler devono essere sempre conservate nel blister ed essere estratte solo immediatamente prima dell'uso.
- Non spingere la capsula attraverso la pellicola per rimuoverla dal blister.
- Non ingerire la capsula.
- Non usare le capsule di Ultibro Breezhaler con nessun altro inalatore.
- Non usare l'inalatore **Ultibro Breezhaler** per prendere capsule di qualsiasi altro medicinale.
- Non mettere mai la capsula in bocca o nel boccaglio dell'inalatore.
- Non premere i pulsanti laterali più di una volta.
- Non soffiare nel boccaglio.
- Non premere i pulsanti laterali mentre si inala attraverso il boccaglio.
- Non maneggiare le capsule con le mani bagnate.
- Non lavare mai l'inalatore con acqua.